

КриоКонсоль

СИСТЕМА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КРИОАБЛАЦИИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

КриоКонсоль состоит из электрических и механических компонентов, а также специального программного обеспечения для контроля и записи процедуры криоаблации, выполняемой катетером Arctic Front® и/или семейством катетеров Freezor®. КриоКонсоль контролирует подачу жидкого хладагента через коаксиальный кабель в катетер и отводит испарения хладагента от катетера в условиях постоянного вакуума через систему очистки воздуха больницы. В катетер и КриоКонсоль встроены различные датчики, гарантирующие безопасность процедуры.

Информация для заказа

Код для заказа	
106E2	КриоКонсоль




Технические характеристики консоли

Размер		
Высота (макс)	157 см	
Высота (миним)	126 см	
Глубина	59 см	
Ширина	55 см	
Bec	131 кг (без баллона с оксидом азота)	
Другие характеристики		
Эксплуатационные параметры	15-30 °C. Максимальная влажность 75%	
Характеристики хладагента	Сжиженный оксид азота (N ₂ O) 99.5% очистка, уровень влажности < 50 ppm	

Принадлежности

Коаксиальный кабель обеспечивает подачу хладагента в катетер и отведение испарений хладагента в КриоКонсоль. Электрический кабель предназначен для электрического соединения между катетером и КриоКонсолью. Соединительный блок обеспечивает катетер электрическим интерфейсом. ЭКГ кабель предназначен для выведения сигналов с катетера на ЭКГ монитор (через 2 мм коннекторы). Выводной шланг используется для подсоединения КриоКонсоли к системе очистки воздуха больницы.

Код для заказа	Описание	
Стерильные принадлежности		
203CX	Коаксиальный кабель (1 штука)	
203CXC	Коаксиальный кабель (упаковка - 12 штук)	
2035U	Электрический кабель (1 штука)	
2035UC	Электрический кабель (упаковка - 12 штук)	
Другие принадлежности		
2037A	Соединительный блок	
2035W	ЭКГ кабель Используется только с семейством Freezor	
1035C(W)	Выводной шланг (белый) – 6.0 м	
1035D(W)	Выводной шланг (белый) – 7.5 м	
1035E(W)	Выводной шланг (белый) – 9.0 м	
1035F(W)	Выводной шланг (белый) – 12.0 м	
1038E	Сетевой кабель	
103NE	Баллон для хладагента N₂O	

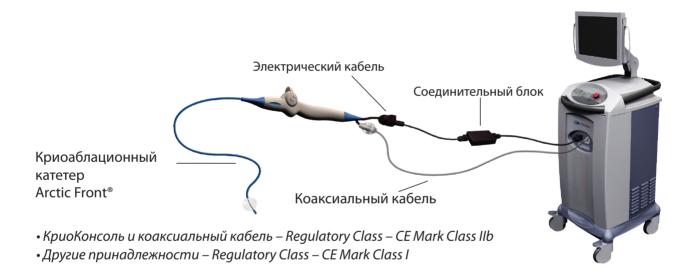

www.medtronic.com www.cryocath.com

Medtronic AF Solutions Medtronic BV Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen The Netherlands Tel: +31 45 5668951 Fax: +31 45 5668024 **ООО Медтроник** Почтовый адрес: Россия, 123317, Москва, Пресненская набережная, д. 10 Тел.: +7 495 580-7377 Факс: +7 495 580-7378 E-mail: info.russia@medtronic.ru

