


Admiral Xtreme

Информация для заказа

Диаметр баллона (мм)	Длина баллона (мм)	Реком. интродьюсер (F)	Расчетное давл. разрыва (бар)	Кат. № Рабочая длина 80 см	Кат. № Рабочая длина 130 см
3	20	5	18	SBI 030 020 080	SBI 030 020 130
3	40	5	18	SBI 030 040 080	SBI 030 040 130
3	80	5	18	SBI 030 080 080	SBI 030 080 130
3	120	5	18	SBI 030 120 080	SBI 030 120 130
4	20	5	18	SBI 040 020 080	SBI 040 020 130
4	40	5	18	SBI 040 040 080	SBI 040 040 130
4	60	5	18	SBI 040 060 080	SBI 040 060 130
4	80	5	18	SBI 040 080 080	SBI 040 080 130
4	120	5	18	SBI 040 120 080	SBI 040 120 130
4	150	5	14	SBI 040 150 080	SBI 040 150 130
4	200	5	14	SBI 040 200 080	SBI 040 200 130
4	250	5	14	SBI 040 250 080	SBI 040 250 130
4	300	5	14	SBI 040 300 080	SBI 040 300 130
5	20	5	17	SBI 050 020 080	SBI 050 020 130
5	40	5	17	SBI 050 040 080	SBI 050 040 130
5	60	5	17	SBI 050 060 080	SBI 050 060 130
5	80	5	15	SBI 050 080 080	SBI 050 080 130
5	120	5	15	SBI 050 120 080	SBI 050 120 130
5	150	5	14	SBI 050 150 080	SBI 050 150 130
5	200	5	14	SBI 050 200 080	SBI 050 200 130
5	250	5	14	SBI 050 250 080	SBI 050 250 130
5	300	6	14	SBI 050 300 080	SBI 050 300 130
6	20	5	17	SBI 060 020 080	SBI 060 020 130
6	40	5	17	SBI 060 040 080	SBI 060 040 130
6	60	5	17	SBI 060 060 080	SBI 060 060 130
6	80	5	15	SBI 060 080 080	SBI 060 080 130
6	120	5	15	SBI 060 120 080	SBI 060 120 130
6	150	5	12	SBI 060 150 080	SBI 060 150 130
6	200	6	12	SBI 060 200 080	SBI 060 200 130
6	250	6	12	SBI 060 250 080	SBI 060 250 130
6	300	6	12	SBI 060 300 080	SBI 060 300 130
7	20	5	16	SBI 070 020 080	SBI 070 020 130
7	40	5	16	SBI 070 040 080	SBI 070 040 130
7	60	5	14	SBI 070 060 080	SBI 070 060 130
7	80	5	14	SBI 070 080 080	SBI 070 080 130
7	120	6	12	SBI 070 120 080	SBI 070 120 130
7	150	6	12	SBI 070 150 080	SBI 070 150 130
7	200	6	12	SBI 070 200 080	SBI 070 200 130
7	250	6	12	SBI 070 250 080	SBI 070 250 130
8	20	6	14	SBI 080 020 080	SBI 080 020 130
8	40	6	14	SBI 080 040 080	SBI 080 040 130
8	60	6	11	SBI 080 060 080	SBI 080 060 130
8	80	6	11	SBI 080 080 080	SBI 080 080 130
9	20	6	14	SBI 090 020 080	SBI 090 020 130
9	40	6	14	SBI 090 040 080	SBI 090 040 130
9	60	6	11	SBI 090 060 080	SBI 090 060 130
9	80	6	11	SBI 090 080 080	SBI 090 080 130
10	20	6	11	SBI 100 020 080	SBI 100 020 130
10	40	6	11	SBI 100 040 080	SBI 100 040 130
12	20	7	11	SBI 120 020 080	SBI 120 020 130
12	40	7	11	SBI 120 040 080	SBI 120 040 130

Специфические решения с учетом анатомических особенностей

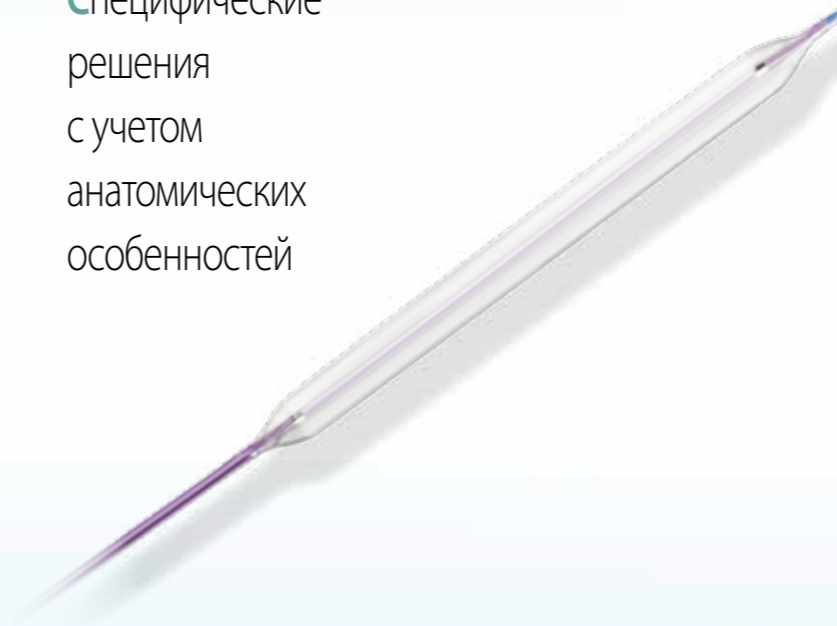

Система доставки: Доставка по проводнику (OTW)
 Материал баллона: Flexitec™ Xtreme
 Покрытие баллона: LFC Гидрофильное
 Маркеры баллона: 2 обжатых (с нулевым профилем) платино-иридиевых

Диаметр шахты катетера: 5F-6F
 Рабочая длина шахты катетера: 80 и 130 см
 Совместимость с интродьюсером: 5F-7F
 Совместимость с проводником: 0,035"

Admiral Xtreme

БАЛЛОННЫЙ КАТЕТЕР ДЛЯ АНГИОПЛАСТИКИ НА СИСТЕМЕ ДОСТАВКИ ОТW, СОВМЕСТИМЫЙ С ПРОВОДНИКОМ 0,035"

Превосходный двухпросветный дизайн шахты катетера

- Повышенная проходимость и стойкость к перегибам, в сочетании с гибкостью
- Поддержка контралатеральных маневров
- Увеличенный просвет для нагнетания позволяет сократить время сдувания баллона

Низкий профиль баллона

- Компактная укладка баллона
- Прохождение зоны поражения без усилий

Гидрофильное покрытие



- Увеличивает проходимость

Материал баллона FLEXITEC™ Xtreme

- Сверхтонкие стенки баллона
- Устойчив к царапинам
- Высокое расчетное давление разрыва

Широкая линейка длин баллона

- Доступны баллоны длиной до 300 мм
- Для однократной дилатации протяженных поражений
- Патентованная технология препятствует изгибам баллона в форме «банана»

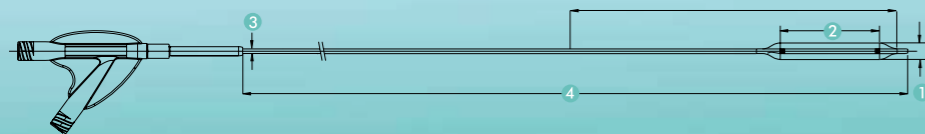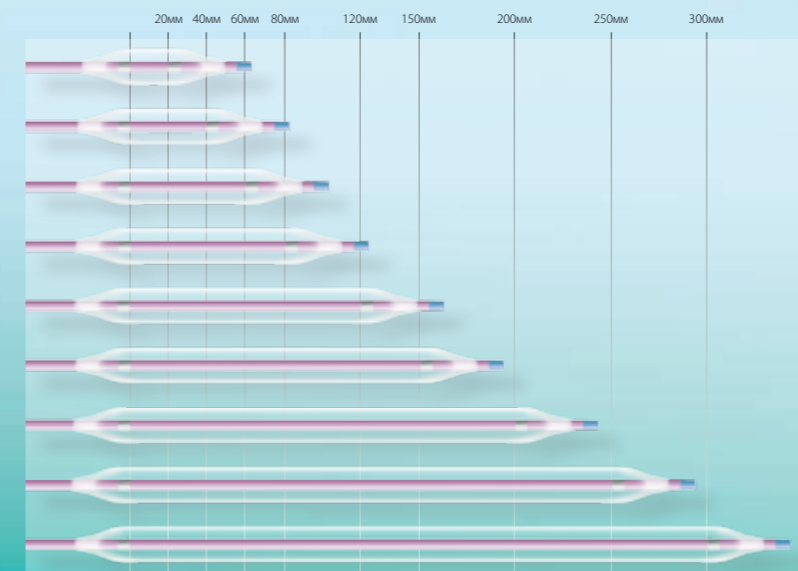

- 1 Номинальный диаметр баллона
- 2 Номинальная длина баллона
- 3 Диаметр шахты катетера
- 4 Рабочая длина шахты катетера



БАЛЛОННЫЕ КАТЕТЕРЫ