


AZUR®

Структурная спираль

Спирали для эмболизации

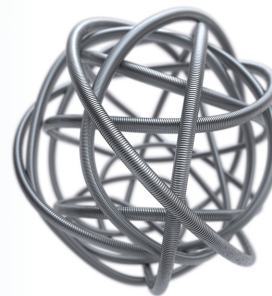


AZUR® Структурная спираль является платиновой спиралью, которая при введении в сосуд сворачивается в трехмерную фигуру для заполнения полости аневризмы или внутренней полости артерии.

Спираль предназначена для обеспечения повышенной стабильности и безопасности в сложных ситуациях, таких как аневризма с широкой шейкой или сосудов с высокой скоростью кровотока.

Характеристики изделия

- Предоставляет более полное покрытие полости аневризмы вследствие трехмерного сворачивания спирали
- Предоставляет равномерное распределение витков спирали в полости аневризмы
- Не имеет временных ограничений для репозиции
- Более длинные спирали для дополнительной стабильности (до 50 см)
- Спирали подходят для разных анатомических структур
- Простота размещения в аневризме нескольких структурных спиралей
- Каждый последующий виток осторожно вращается по траектории, меняя направление по мере размещения

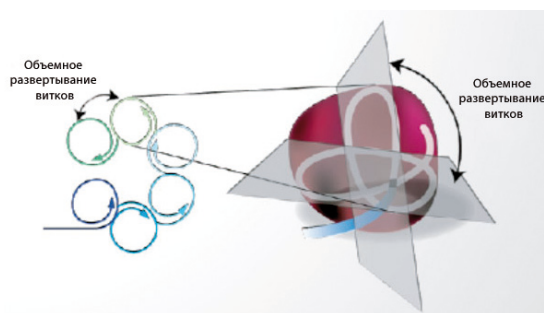

Общие Характеристики

Материал стержня	Платина
Тип установки	Электрическое отделение
Покрытие	Отсутствует
Длина установочного проводника	150 см
Совместимый катетер	Микрокатетер – внутренний просвет не менее 0,021"

Спецификация по позициям

Диаметр спирали	Диаметр витка (мм)	Длина (см)	Каталожный номер
0.018" (0.46 мм)	8	20	45-680820
0.018" (0.46 мм)	10	26	45-681026
0.018" (0.46 мм)	14	34	45-681434
0.018" (0.46 мм)	20	50	45-682050

Пожалуйста, укажите каталожный номер при размещении заказа