
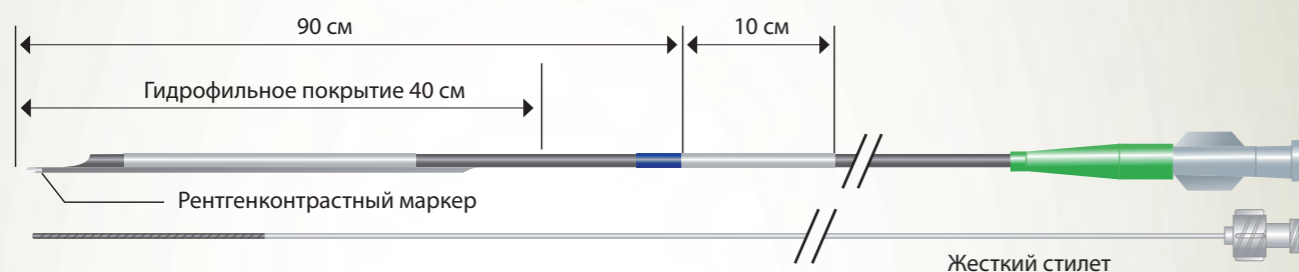



ELIMINATE™
Тромбоаспирационный катетер

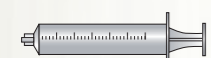


Компоненты набора Eliminate™

 x2
30 мл шприц с запорным механизмом (поликарбонат)

 x1
Удлинитель с 2-х ходовым клапаном

 x1
Промывочное устройство

 x1
Защитный фильтр

Информация для заказа

Совместимость с проводниковым катетером	Eliminate™
6Fr (Внутренний диаметр ≥ 0,70 дюймов / 1,78 мм)	EG1602
7Fr (Внутренний диаметр ≥ 0,80 дюймов / 2,03 мм)	EG1652

Спецификации

Длина кончика	6 мм
Покрытие	Гидрофильное
Секция быстрой замены (RX часть)	23 см
Рентгенконтрастный маркер	1 мм, расположенный на 4 мм от кончика

Позиционные маркеры	Длиной 10 см = единственная белая отметка расположенная 90 см от дистального кончика
Совместимый проводник	0,014" (0,36 мм)
Длина катетера	140 см

TERUMO®

Terumo Corporation
44-1, 2-chome, Hatagaya
Shibuya-ku, Tokyo 151-0072,
Japan
Tel.: +81 3 3374 8111
Fax: +81 3 3374 8196

European Headquarters

Terumo Europe N.V.
Interleuvenlaan 40
3001 Leuven, Belgium
Tel.: +32 16 38 12 11
Fax: +32 16 40 02 49

**Terumo Europe
Interventional Systems
Liaison Office**
Immeuble Krebs
8, rue Jean-Pierre Timbaud
CS 10720
78067 Saint Quentin
en Yvelines Cedex, France
Tel.: +33 139 30 95 75
Fax: +33 139 30 95 70

European Offices

**Terumo Europe N.V.
Benelux Sales Division**
Interleuvenlaan 40
3001 Leuven, Belgium
Tel.: +32 16 39 25 80
Fax: +32 16 39 25 99
The Netherlands:
Tel.: 0800 0220396
Fax: 0800 0220414

Laboratoires Terumo France S.A.
Parc Ariane - Bât. Uranus
1, rue Hélène Boucher
78284 Guyancourt Cedex, France
Tel.: +33 130 96 13 00
Fax: +33 130 43 60 85

Terumo Italia S.r.l.
Via Simone Martini, 143/145
00142 Roma RM, Italy
Tel.: +39 0651 96 14 20
Fax: +39 0650 30 407

Terumo UK Ltd
Tamesis, The Causeway
Egham, Surrey
TW20 9AW, United Kingdom
Tel.: +44 1784 476 200
Fax: +44 1784 476 201

Terumo Deutschland GmbH
Ludwig-Erhard-Strasse 6
65760 Eschborn, Germany
Tel.: +49 6196 80 230
Fax: +49 6196 80 23 200

**Terumo Deutschland GmbH
Zweigniederlassung Österreich**
Liebermannstrasse F10 301
2345 Brunn am Gebirge, Österreich
Tel.: +43 2236 378 020
Fax: +43 2236 378 020 100

Terumo Deutschland GmbH
Zweigniederlassung Spreitenbach
Bodenackerstrasse 3
8957 Spreitenbach, Switzerland
Tel.: +41 56 419 10 10
Fax: +41 56 419 10 11

Terumo Europe España SL
Avda. Juan Carlos I, Nº 13 - 7ª Planta
Edificio Torre La Garena
28806 Alcalá de Henares
(Madrid), Spain
Tel.: +34 9021 01 298
Fax: +34 9021 01 358

**Terumo Denmark
Filial of Terumo Sweden AB**
Tel.: +45 7020 93 80
Fax: +45 7020 94 80

Terumo Sweden AB
Nya Varvet, Byggnad 90
Sven Källfelts Gata 18
426 71 Västra Frölunda, Sweden
Tel.: +46 3174 85 880
Fax: +46 3174 85 890

Терумо Юроп Н.В. Представительство в Москве

Бизнес Центр «Северная Башня»
13 этаж, ул. Тестовская 10
Москва 123317, Россия
Тел.: + 7 495 988 4740
Факс: + 7 495 988 4739

**Terumo Corporation Dubai
Branch
(Middle East and Africa)**
Al Masraf Tower, 22nd Floor
P. O. Box 20291 Dubai
U.A.E.
Tel.: + 971 4 221 2220
Fax: + 971 4 221 3330

**Адреса могут быть изменены,
сверяйте с нашим сайтом,
пожалуйста.**

* Зарегистрированный товарный знак
Опубликовано Терумо Юроп Н.В.

ELIMINATE™

Тромбоаспирационный катетер

Легкое решение для
удаления тромбов



Легко доставляемое решение для удаления тромбов

Eliminate™ - инновационный тромбоспирационный катетер с предустановленным стилетом, обеспечивающий оптимальный баланс между проходимостью, устойчивостью к перегибам и тромбоспирационной способностью.

Доставляемость


Инновационная технология Eliminate представляет улучшенную доставляемость и устойчивость к перегибам

- **Предустановленный стилет** обеспечивает улучшенную толкаемость («pushability») и обеспечивает оптимальную проходимость сложных участков сосуда
- **Оплетка по всей длине shaft** обеспечивает повышенную устойчивость к перегибам
- **RX-сегмент длиной 23 см** обеспечивает улучшенную проходимость («trackability»)
- **Гидрофильное покрытие** облегчает прохождение участков сосуда со сложной анатомией




Совместимый с проводниковым катетером 6 Fr

Дистальная часть

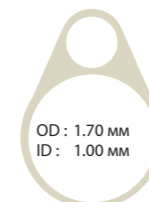

Зона экстракции
0.78 мм²


Проксимальная часть

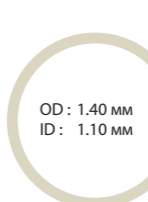

Зона экстракции
0.95 мм²

Совместимый с проводниковым катетером 7 Fr

Дистальная часть

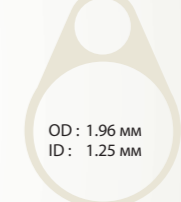

Зона экстракции
1.23 мм²

Проксимальная часть




Зона экстракции
1.32 мм²

Аспирационная способность

Продвинутая технология для улучшенного всасывания


- **Большой просвет для экстракции**, а также оплетка shaft по всей длине обеспечивают постоянную эффективную аспирацию
- **Закругленный и короткий кончик** катетера сочетает проходимость с безопасной и эффективной аспирацией
- Выбор из **2-х размеров** (совместимых с проводниковыми катетерами 6 Fr или 7 Fr) для разных клинических ситуаций

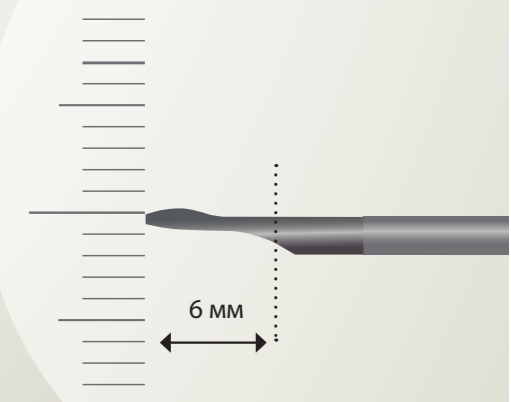

Легкость применения

Управление одним оператором

- **Короткий и тонкий дистальный рентгенконтрастный маркер** обеспечивает замечательную визуализацию и повышенную гибкость дистальной части катетера
- **Полный набор содержит:**
 - Два 30 мл шприца с запорным механизмом
 - Удлинитель (25 см) с 2-х ходовым клапаном
 - Защитный фильтр

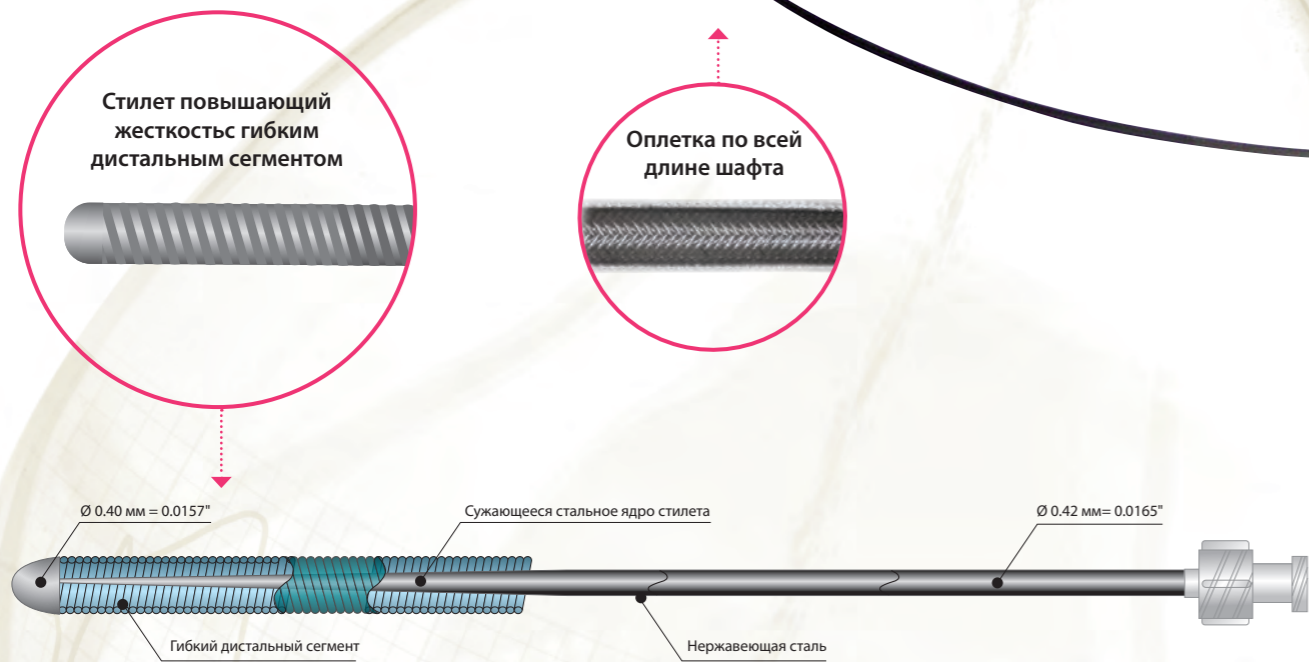

143 см стилет повышающий жесткость