


Стандартный набор интродьюсеров Radifocus® II

Интродьюсер

Интродьюсеры предназначены для чрескожного введения в сосуд в целях облегчения процедуры вмешательства в целом.

Характеристики изделия

- Уникальный гемостатический клапан *Тегито* поддерживает необычайно высокий уровень гемостаза, что позволяет избежать кровотечений и аспирации воздуха
- Плавный переход «шaft-дилататор» и оптимальная конусообразная конструкция дилататора позволяют уменьшить сопротивление проколу
- Чрезвычайно тонкая рентгеноконтрастная стенка с муфтой для предотвращения перекручивания, обеспечивающая превосходное управление катетером
- Дилататор с защелкой, предотвращающей его смещение при введении и позволяющей осуществлять удаление дилататора одной рукой

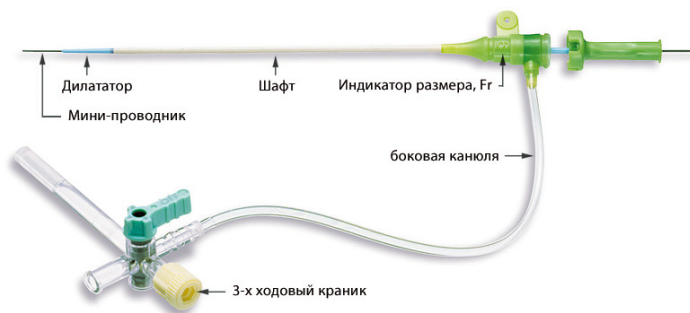

В наличии имеются следующие наборы

- **Набор А** содержит интродьюсер, дилататор, пластиковый мини-проводник и пластиковый внутривенный мини-катетер (на пункционной игле)
- **В набор В** входит интродьюсер, дилататор, пластиковый или пружинный мини-проводник
- **В набор С** входит интродьюсер и дилататор
- **В набор R** входит интродьюсер, дилататор, пружинный мини-проводник и стандартная металлическая пункционная игла

Набор А

Общие характеристики

Длина интродьюсера	10 см
Мини-проводник	Пластиковый прямой или изогнутый 0.025" (0.64 мм) для 4 Fr, 0.035" (0.89 мм) для всех остальных 45 см
Пункционная игла	Пластиковый внутривенный мини-катетер - 18G x 2 1/2" (1.2 x 64 мм), кроме 4 Fr: 20G x 2" (0.9 x 51 мм), в набор входит 2.5 мл-шприц
Совместимость проводника	0.025" (0.64 мм) для 4 Fr 0.035" (0.89 мм) для всех остальных
Упаковка	Лоток

Набор В

1-го типа в лотке с пластиковым мини-проводником

Общие характеристики

Длина интродьюсера	10 см and 25 см
Мини-проводник	Пластиковый прямой или изогнутый 0.025" (0.64 мм) или 0.035" (0.89 мм) для 4 Fr и 0.038" (0.97 мм) для всех остальных 45 см для 10-см интродьюсера и 80 см для 25-см интродьюсера
Совместимость проводника	0.025" (0.64 мм) или 0.035" (0.89 мм) для 4 Fr и 0.038" (0.97 мм) для всех остальных
Упаковка	Лоток

Спецификация

Внутренний диаметр	Тип мини-проводника	
	45 см изогнутый	45 см прямой
4 Fr	RS*A40K10AQ RS+A40K10AQ	RS*A40G10SQ RS+A40G10SQ
5 Fr	RS*A50K10AQ RS+A50K10AQ	RS*A50K10SQ RS+A50K10SQ
6 Fr	RS*A60K10AQ RS+A60K10AQ	RS*A60K10SQ RS+A60K10SQ
7 Fr	—	RS*A70K10SQ RS+A70K10SQ
8 Fr	—	RS*A80K10SQ RS+A80K10SQ
9 Fr	—	RS*A90K10SQ
10 Fr	—	RS*A10K10SQ
11 Fr	—	RS*A80K11SQ

Пожалуйста, укажите каталожный номер при размещении заказа.

Спецификация

Внутренний диаметр	Совместимость проводника	Длина интродьюсера 10 см		Длина интродьюсера 25 см
		Тип мини-проводника		
		45 см угловой	45 см прямой	80 см угловой
4 Fr	0.025" (0.64 мм)	—	RS*B40G10SQ RS+B40G10SQ	—
4 Fr	0.035" (0.89 мм)	RS*B40K10AQ RS+B40K10AQ	RS*B40K10SQ RS+B40K10SQ	—
5 Fr	0.038" (0.97 мм)	RS*B50N10AQ RS+B50N10AQ	RS*B50N10SQ RS+B50N10SQ	RS*B50N25AQ RS+B50N25AQ
6 Fr	0.038" (0.97 мм)	—	RS*B60N10SQ RS+B60N10SQ	RS*B60N25AQ RS+B60N25AQ
7 Fr	0.038" (0.97 мм)	—	RS*B70N10SQ RS+B70N10SQ	RS*B70N25AQ RS+B70N25AQ
8 Fr	0.038" (0.97 мм)	—	RS*B80N10SQ RS+B80N10SQ	RS*B80N25AQ RS+B80N25AQ
9 Fr	0.038" (0.97 мм)	—	RS*B90N10SQ	RS*B90N25AQ
10 Fr	0.038" (0.97 мм)	—	RS*B10N10SQ	RS*B10N25AQ
11 Fr	0.038" (0.97 мм)	—	RS*B11N10SQ	RS*B11N25AQ

Пожалуйста, укажите каталожный номер при размещении заказа

Набор В

2-го типа в лотке с пружинным мини-проводником

Общие характеристики

Длина интродьюсера	10 см
Мини-проводник	Пружинный двусторонний - прямой и J-образный 0.035" (0.89 мм) и 0.038" (0.97 мм) 45 см
Совместимость проводника	0.035" (0.89 мм) or 0.038" (0.97 мм)
Упаковка	Лоток

Спецификация

Внутренний диаметр	Совместимость проводника	
	0.035" (0.89 мм)	0.038" (0.97 мм)
4 Fr	RS*B40K10MQ RS+B40K10MQ	—
5 Fr	RS*B50K10MQ RS+B50K10MQ	RS*B50N10MQ RS+B50N10MQ
6 Fr	RS*B60K10MQ RS+B60K10MQ	RS*B60N10MQ RS+B60N10MQ
7 Fr	RS*B70K10MQ RS+B70K10MQ	RS*B70N10MQ RS+B70N10MQ
8 Fr	RS*B80K10MQ RS+B80K10MQ	RS*B80N10MQ RS+B80N10MQ
9 Fr	RS*B90K10MQ	RS*B90N10MQ
10 Fr	RS*B10K10MQ	RS*B10N10MQ
11 Fr	RS*B11K10MQ	RS*B11N10MQ

Пожалуйста, укажите каталожный номер при размещении заказа.

Набор С

Общие характеристики

Длина интродьюсера	10 см and 25 см
Совместимость проводника	0.025" (0.64 мм), 0.035" (0.89 мм) для 4 Fr и 0.038" (0.97 мм) для всех остальных
Упаковка	Пакет

Спецификация

Внутренний диаметр	Совместимость проводника	Длина интродьюсера	
		10 см	25 см
4 Fr	0.025" (0.64 мм)	RS*C40G10NR RS+C40G10NR	—
4 Fr	0.035" (0.89 мм)	RS*C40K10NR RS+C40K10NR	RS*C40K25NR RS+C40K25NR
5 Fr	0.038" (0.97 мм)	RS*C50N10NR RS+C50N10NR	—
6 Fr	0.038" (0.97 мм)	RS*C60N10NR RS+C60N10NR	RS*C60N25NR RS+C60N25NR
7 Fr	0.038" (0.97 мм)	RS*C70N10NR RS+C70N10NR	RS*C70N25NR RS+C70N25NR
8 Fr	0.038" (0.97 мм)	RS*C80N10NR RS+C80N10NR	RS*C80N25NR RS+C80N25NR
9 Fr	0.038" (0.97 мм)	RS*C90N10NR	—
10 Fr	0.038" (0.97 мм)	RS*C10N10NR	—
11 Fr	0.038" (0.97 мм)	RS*C11N10NR	—

Пожалуйста, укажите каталожный номер при размещении заказа.

3-го типа в пакете с пружинным мини-проводником

Общие характеристики

Длина интродьюсера	10 см
Мини-проводник	Пружинный двусторонний - прямой и J-образный 0.035" (0.89 мм) для 4 Fr и 0.038" (0.97 мм) для всех остальных 45 см
Совместимость проводника	0.035" (0.89 мм) and 0.038" (0.97 мм)
Упаковка	Пакет

Спецификация

Внутренний диаметр	Номер позиции
4 Fr	RS*B40K10MR
5 Fr	RS*B50N10MRD
6 Fr	RS*B60N10MRD
7 Fr	RS*B70N10MRD
8 Fr	RS*B80N10MRD
9 Fr	RS*B90N10MRD
10 Fr	RS*B10N10MRD
11 Fr	RS*B11N10MRD

Пожалуйста, укажите каталожный номер при размещении заказа.

Набор R

Общие характеристики

Длина интродьюсера	10 см
Мини-проводник	Пружинный двусторонний - прямой и J-образный 0.035" (0.89 мм) для 4 Fr и 0.038" (0.97 мм) для всех остальных 45 см
Инъекционная игла	Металлическая пункционная игла - 18G x 2 3/4" (1.2 x 70 мм)
Совместимость проводника	0.035" (0.89 мм) для 4 Fr и 0.038" (0.97 мм) для всех остальных
Упаковка	Лоток

Спецификация

Внутренний диаметр	Номер позиции
4 Fr	RS*R40K10MQ
5 Fr	RS*R50N10MQ
6 Fr	RS*R60N10MQ
7 Fr	RS*R70N10MQ
8 Fr	RS*R80N10MQ
9 Fr	RS*R90N10MQ

Пожалуйста, укажите каталожный номер при размещении заказа.

Набор интродьюсеров для трансрадиального доступа Radifocus® II

Интродьюсер



Интродьюсеры предназначены для чрескожного введения в сосуд с целью облегчения процедуры вмешательства в целом.

Будучи новатором и лидером в области сосудистого доступа, компания Terumo стремится предложить полный набор решений для процедуры трансрадиального вмешательства, устройства этой серии позволяют минимизировать воздействие на пациента и оптимизировать процедуру трансрадиального доступа.

Используя технологии, включающие превосходное гидрофильное покрытие и уменьшение размера устройств, Terumo продолжает устанавливать новые стандарты в области трансрадиальных вмешательств.

Характеристики изделия

- Дилататор сужается к концу, что позволяет минимизировать степень травмирования сосуда.
- Набор интродьюсеров с гидрофильным «М» покрытием облегчает процесс введения и извлечения при проведении стандартных процедур трансрадиального доступа
- Уникальный гемостатический клапан Terumo поддерживает необычайно высокий уровень гемостаза, что позволяет избежать кровотечений и аспирации воздуха
- Плавный переход «шафт-дилататор» и оптимальная конусообразная конструкция дилататора позволяют уменьшить сопротивление проколу
- Чрезвычайно тонкая рентгеноконтрастная стенка с муфтой для предотвращения перекручивания, обеспечивающая превосходное управление катетером
- Дилататор с защелкой, предотвращающей смещение дилататора при введении и позволяющей осуществлять удаление дилататора одной рукой



Решение № 1

Набор специальных интродьюсеров для трансрадиального доступа с конусообразным наконечником Radifocus® Introducer II, включающий интродьюсер, дилататор, пружинный мини-проводник и металлическую пункционную иглу особо острой заточки

- Внутренний диаметр наконечника дилататора равен наружному диаметру мини-проводника
- Металлическая пункционная игла для микропроколов с коротким концевым срезом (22G/21G/20G) соответствует мини-проводнику, что позволяет избежать осложнений по месту прокола

Общие характеристики

Длина шафта интродьюсера	7 см и 10 см
Мини-проводник	Пружинный прямой 0.018" (0.46 мм), 0.021" (0.53 мм) и 0.025" (0.64 мм) 45 см
Пункционная игла	Металлическая пункционная игла - 22G x 1½ (0.7 x 38 мм), 21G x 1½ (0.8 x 38 мм), 20G x 1½ (0.9 x 38 мм)
Совместимость проводника	0.018" (0.46 мм), 0.021" (0.53 мм) и 0.025" (0.64 мм)
Упаковка	Лоток

Спецификация

Внутренний диаметр	Длина интродьюсера 7 см		Длина интродьюсера 10 см		
	Совместимый с проводником				
	0.018" (0.46 мм)	0.025" (0.64 мм)	0.018" (0.46 мм)	0.021" (0.53 мм)	0.025" (0.64 мм)
4 Fr	RT-R40A07PQ	RT-R40G07PQ	RT-R40A10PQ	RT-R40D10PQ	RT-R40G10PQ
5 Fr	RT-R50A07PQ	RT-R50G07PQ	RT-R50A10PQ	RT-R50D10PQ	RT-R50G10PQ
6 Fr	RT-R60A07PQ	RT-R60G07PQ	RT-R60A10PQ	RT-R60D10PQ	RT-R60G10PQ
7 Fr	—	—	—	RT-R70D10PQ	—

▶ Решение № 2

Набор интродьюсеров с гидрофильным M покрытием Radifocus® Introducer II Coat™

- Внутренний диаметр наконечника дилатора равен наружному диаметру мини-проводника
- Для извлечения интродьюсера с покрытием M Coat™ требуется в два раза меньше усилий по сравнению с традиционными интродьюсерами без покрытия

В наличии имеются следующие наборы:

- **Набор M Coat™ A** включает интродьюсер, пластиковый мини-проводник и пластиковый внутривенный мини-катетер (на пункционной игле)
- **Набор M Coat™ R** включает интродьюсер, пружинный мини-проводник и стандартную металлическую пункционную иглу

▶ Набор M Coat™ A

Общие характеристики

Длина интродьюсера	10 см, 16 см и 25 см
Покрытие интродьюсера	Гидрофильное M Coat™
Мини-проводник	Пластиковый прямой 0.025" (0.64 мм) 45 см для 10-см интродьюсера и 80 см для 16-см и 25-см интродьюсера
Пункционная игла	Пластиковый внутривенный мини-катетер - 20G x 2" (0.9 x 51 мм), в набор также входит 2.5-мл шприц
Совместимость проводника	0.025" (0.64 мм)
Packaging	Лоток

Спецификация

Внутренний диаметр	Длина интродьюсера		
	10 см	16 см	25 см
5 Fr	RM*AF5J10SQW	RM*AF5J16SQW	RM*AF5J25SQW
6 Fr	RM*AF6J10SQW	RM*AF6J16SQW	RM*AF6J25SQW

Пожалуйста, укажите каталожный номер при размещении заказа.

▶ M Coat™ R Kit

Общие характеристики

Длина интродьюсера	10 см, 16 см и 25 см
Покрытие интродьюсера	Гидрофильное M Coat™
Мини-проводник	Пружинный прямой 0.021" (0.53 мм) и 0.025" (0.64 мм) 45 см для 10-см интродьюсера, 80 см для 16-см и 25-см интродьюсера
Пункционная игла	Металлическая пункционная игла - 21G x 1½ (0.8 x 38 мм), 20G x 1½ (0.9 x 38 мм)
Совместимость проводника	0.021" (0.53 мм) and 0.025" (0.64 мм)
Упаковка	Лоток

Спецификация

Внутренний диаметр	Совместимость проводника	Длина интродьюсера		
		10 см	16 см	25 см
5 Fr	0.021" (0.53 mm)	RM*RF5F10PQ	RM*RF5F16PQ	RM*RF5F25PQ
5 Fr	0.025" (0.64 mm)	RM*RF5J10PQ	RM*RF5J16PQ	RM*RF5J25PQ
6 Fr	0.021" (0.53 mm)	RM*RF6F10PQ	RM*RF6F16PQ	RM*RF6F25PQ
6 Fr	0.025" (0.64 mm)	RM*RF6J10PQ	RM*RF6J16PQ	RM*RF6J25PQ

Пожалуйста, укажите каталожный номер при размещении заказа.

Педиатрический набор интродьюсеров Radifocus® Introducer II


Интродьюсер



Интродьюсеры предназначены для чрескожного введения в сосуд с целью облегчения процедуры вмешательства в целом.

Характеристики изделия

- Уникальный гемостатический клапан *Тегито* поддерживает необычайно высокий уровень гемостаза, что позволяет избежать кровотечений и аспирации воздуха
- Плавный переход «шaft-дилататор» и оптимальная конусообразная конструкция дилататора позволяют уменьшить сопротивление проколу
- Чрезвычайно тонкая рентгеноконтрастная стенка с муфтой для предотвращения перекручивания, обеспечивающая превосходное управление катетером
- Дилататор с защелкой, предотвращающей смещение дилататора при введении и позволяющей осуществлять удаление дилататора одной рукой
- Нитиновый сверхэластичный мини-проводник, обеспечивающий плавное введение и извлечение катетера

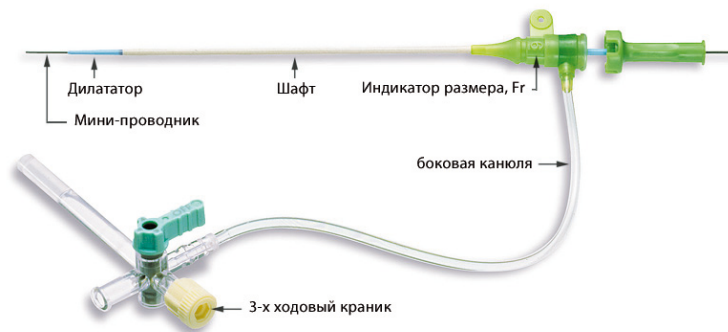

В наличии имеются следующие наборы

- **Набор А** содержит интродьюсер, дилататор, пластиковый мини-проводник и пластиковый внутривенный мини-катетер (на пункционной игле)
- **В набор В** входит интродьюсер, дилататор и пластиковый мини-проводник

Набор А

Общие характеристики

Длина интродьюсера	5 cm and 7 cm
Мини-проводник	Пластиковый прямой 0.025" (0.64 мм) 45 см
Совместимость проводника	0.025" (0.64 мм)
Инъекционная игла	Пластиковый внутривенный мини-катетер - 20G x 2" (0.9 x 51 мм), в набор также входит 2.5-мл шприц
Упаковка	Лоток

Item Specifications

Внутренний диаметр	Длина интродьюсера	
	5 см	7 см
4 Fr	—	RS*A40G075Q RS+A40G075Q
5 Fr	RS*A50G055Q	RS*A50G075Q RS+A50G075Q
6 Fr	RS*A60G055Q	RS*A60G075Q RS+A60G075Q

Пожалуйста, укажите каталожный номер при размещении заказа.

Набор В

Общие характеристики

Длина интродьюсера	7 см
Мини-проводник	Пластиковый прямой 0.025" (0.64 мм) 45 см
Совместимость проводника	0.025" (0.64 мм)
Упаковка	Лоток

Item Specifications

Внутренний диаметр	Длина интродьюсера	Номер позиции
4 Fr	7 см	RS*B40G075Q RS+B40G075Q
5 Fr	7 см	RS*B50G075Q RS+B50G075Q
6 Fr	7 см	RS*B60G075Q RS+B60G075Q

Пожалуйста, укажите каталожный номер при размещении заказа.