




Искусство Восстановления  
**Коронарного Кровотока**

**NEON**

Катетер баллонный  
дилатационный для чрескожной  
транслюминальной коронарной  
ангиопластики (ЧТКА)

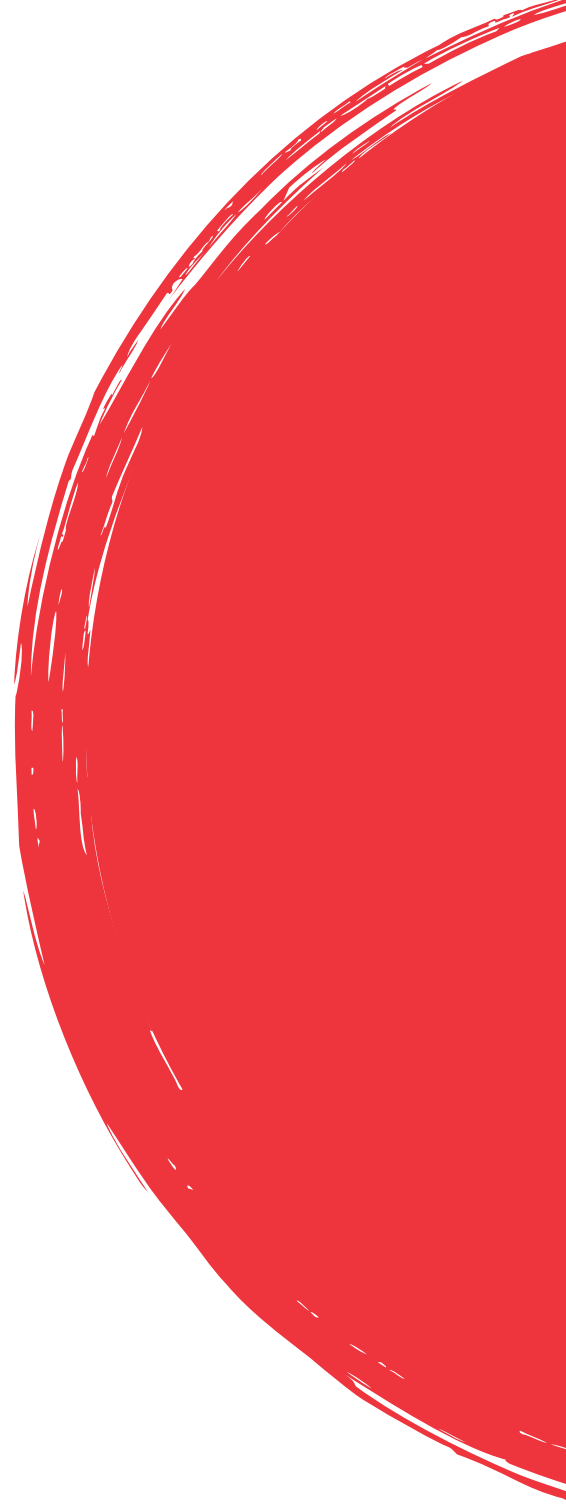


# Признанные японские технологии

## НЕОН

Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (ЧТКА)


Для рутинных вмешательств и сложных случаев

- Изготовлен компанией "Канека Корпорейшн", одним из ведущих японских поставщиков интервенционного инструмента.
- Теперь в составе портфолио продуктов Cordis для ЧТКА, компании Cardinal Health.
- Высокое качество японских баллонов

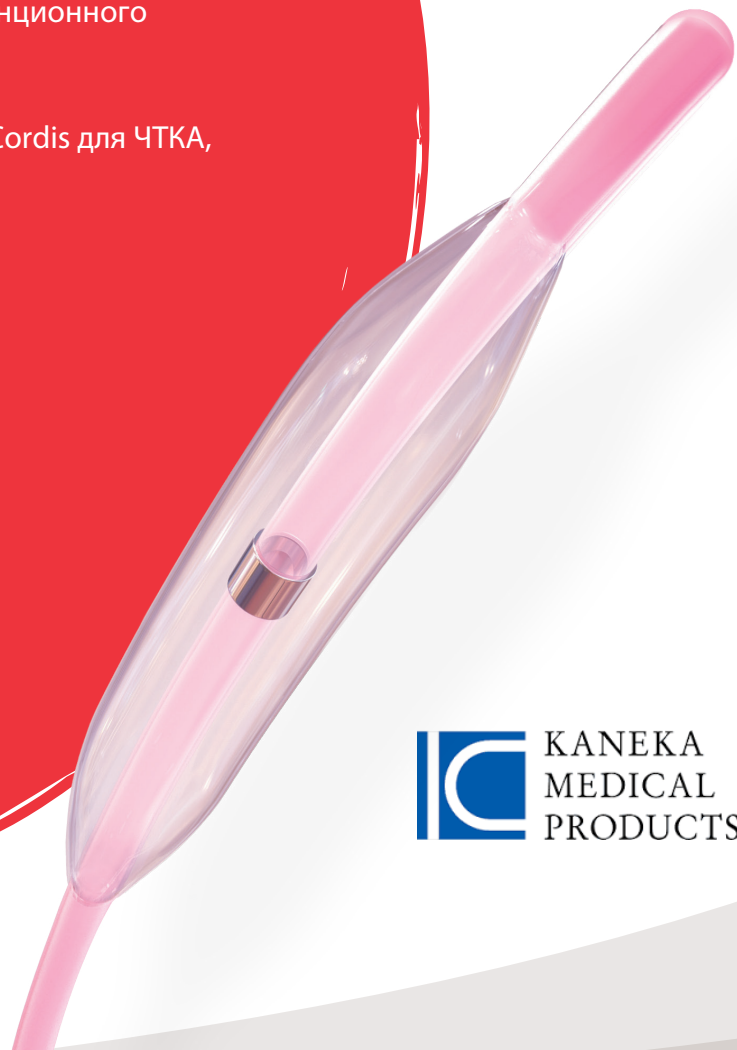


 KANEKA  
MEDICAL  
PRODUCTS

## Передовые показатели прохождения через стеноз

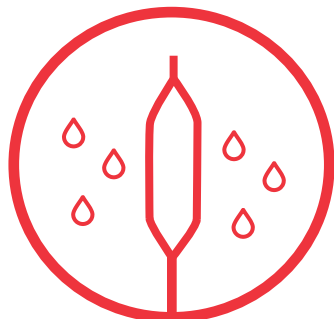


### Гидрофильное покрытие TR2 нового поколения

Улучшает лубрикантность и тем самым снижает сопротивление при прохождении стеноза.

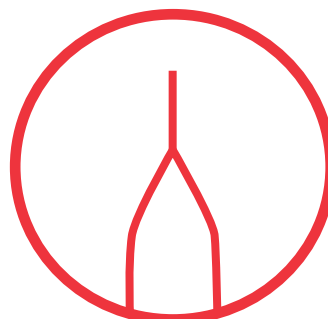

### Коническая форма баллона


Длинный гладкий кончик с низким профилем, разработанный для предотвращения деформации и облегчения прохождения стенозов.

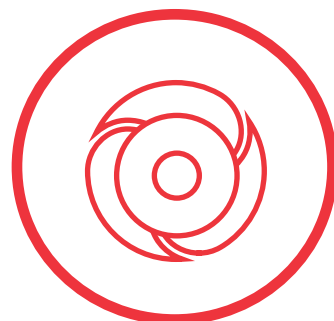

### Уникальная технология тройной укладки баллона

Оптимизированная технология укладки баллона.

Показатель прохождения стеноза баллонами для преддилатации, диаметром 3 мм\*

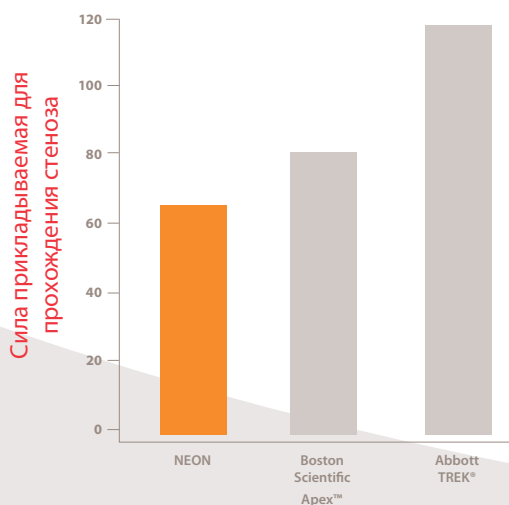



Первичный профиль:	от 0.029 дюйм (ø2.25 мм)
Длина просвета RX для проводника:	25см (ø3.0 ~ 4.0 мм) 27см (ø2.25 ~ 2.75 мм)
Длина shaft:	146 см
Рентгенконтрастные маркеры :	2 шт
Количество складок баллона:	3-fold
Размер совместимого проводника:	0.014"
Наружный диаметр дистальной части shaft:	2.3 F (ø2.25 ~ 2.75 мм) 2.5 F (ø3 мм)
Принадлежности:	Зажим катетера и инструмент для промывания
Доступные размеры:	ø2.25 ~ 3.00 мм диаметры* 10 ~ 20 мм длина
Платформа:	RX - быстрой замены

\* Пожалуйста, обратитесь к торговому представителю Cordis для получения информации о размерах и комбинациях (длина / диаметр).

## NEON

### Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (ЧТКА)

Только для медицинских работников. © 2017 Cardinal Health. Все права защищены.

Продукт зарегистрирован на территории Российской Федерации. Регистрационное удостоверение: РЗН 2020/12998 от 22.12.2020

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по применению, прилагаемой к данному устройству, для получения показаний, противопоказаний, побочных эффектов, предполагаемой процедуры, предупреждений и мер предосторожности. Товарные знаки третьих лиц являются товарными знаками соответствующих владельцев. Недоступно для продажи в США и некоторых других странах.

NEON является торговой маркой корпорации Kaneka, законного производителя NEON и распространяемой корпорацией Cordis.

CORDIS и Cordis LOGO являются товарными знаками Cardinal Health и могут быть зарегистрированы в США и / или в других странах.

Все остальные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. EU2072RUS-19/17.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:** СТЕРИЛЬНЫЙ продукт, только для одноразового использования. Повторная стерилизация или повторное использование может нарушить структурную целостность устройства и может создать риск загрязнения, что, в свою очередь, может привести к риску для здоровья пациентов. Диаметр раздутого баллона должен соответствовать диаметру целевого сосуда.

PTCA = Чрескожная транслюминальная коронарная ангиопластика, NP = Номинальное давление, RBP = Давление разрыва  
PCI = чрескожное коронарное вмешательство, CTO = хроническая тотальная окклюзия.

Диаметр баллона (мм)	Длина баллона (мм)	Совместим с интродьюсером	Номинальное давление (атм)	Давление разрыва (атм)	Код в каталоге
2.25	10	5	6	14	BS22510
2.25	15	5	6	14	BS22515
2.25	20	5	6	14	BS22520
2.5	10	5	6	14	BS25010
2.5	15	5	6	14	BS25015
2.5	20	5	6	14	BS25020
2.75	10	5	6	14	BS27510
2.75	15	5	6	14	BS27515
3	10	5	6	14	BS30010
3	15	5	6	14	BS30015
3	20	5	6	14	BS30020